

Panasonic

**BESTE PFLEGE FÜR
GESUNDE ZÄHNE**



MUNDPFLEGESYSTEME HERBST 2018



SCHÖNE UND GESUNDE ZÄHNE

Perfekt gepflegte Zähne und gesundes Zahnfleisch sorgen für Wohlempfinden und machen aus Ihrem Lächeln ein selbstbewusstes Strahlen. Mit den Mundpflegeprodukten von Panasonic tun Sie alles, was für den optimalen Erhalt Ihrer Zähne und die bestmögliche Pflege von Zahnfleisch und Mundraum notwendig ist.



MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen
finden Sie unter:
panasonic.de/mundpflege

INTRO

MUNDUSCHEN

SCHALLZAHNBÜRSTEN

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

INHALTSVERZEICHNIS

04	Intro
06	Mundduschen
14	Schallzahnbürsten
22	Zubehör
26	Technische Daten

MUNDPFLEGE VON PANASONIC

Zuverlässige Zahnreinigung ist mit dem durchdachten Panasonic Mundpflegesystem ganz einfach. So fühlen Sie sich immer zuverlässig geschützt und perfekt gepflegt.

NACHHALTIG GESUNDE ZÄHNE EIN LEBEN LANG

Mit der perfekt abgestimmten Kombination aus Schallzahnbürste und Munddusche erreichen Sie hygienische Sauberkeit bis in die hintersten Zahnzwischenräume, lassen schädlicher Plaque keine Chance mehr und reduzieren die Entstehung von Zahnstein. So sind Sie in Sachen Prophylaxe immer auf der sicheren Seite und schützen sich wirkungsvoll.

Die ideale Rundumpflege erreichen Sie, wenn Sie Ihre Zähne mit einer Schallzahnbürste putzen und mit einer Munddusche besonders hartnäckige Speisereste schonend ohne mechanische Beanspruchung entfernen. Diese Kombination reinigt nicht nur Zähne und Zahnzwischenräume blitzsauber, sie säubert und pflegt auch das Zahnfleisch und die Zahnfleischtaschen gründlich und sanft.

So gut gepflegt beugen Sie Karies, Parodontitis, empfindlichen Zähnen, Verfärbungen oder Mundgeruch wirkungsvoll vor.

Dank innovativer Entwicklungen wie dem neuartigen Bürsten-Aufsatz, der Zahnfleischtaschen besonders gründlich reinigt und zugleich das Zahnfleisch sanft massiert, leisten Panasonic Mundpflegeprodukte einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Zahngesundheit und Mundhygiene.

Durch die vorbildliche Reinigung des gesamten Mundraumes genießen Sie jeden Tag gepflegte Sauberkeit und frischen Atem. So erhalten Sie Ihre wertvollen Zähne ein Leben lang. Für ein spürbares Plus an Lebensqualität.



INTRO

INTRO

MUND
DÜSCHEN

SCHALLZAHN
BÜRSTEN

ZUBEHÖR

TECHNISCHE
DATEN





PERFEKTE PROPHYLAXE FÜR ZÄHNE UND ZAHNFLEISCH


Gesunde Mundpflege muss gründlich sein – auch da, wo eine Zahnbürste nicht hinkommt: Verwenden Sie einfach nach dem Zähneputzen eine Panasonic Munddusche und erleben Sie das umwerfende Gefühl von Frische und Sauberkeit.

STARKE ZAHNPFLEGE MIT SYSTEM, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Gründliche Zahnpflege ist der effektivste Weg, Karies und Zahnfleischerkrankungen zu verhindern. Auch bei intensiver Anwendung einer Zahnbürste können hartnäckige Speisereste in den Zahnzwischenräumen und ein unsauberes Gefühl im Mundraum zurückbleiben.

Als wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Zahnmedizin zeigt hier eine Panasonic Munddusche ihre Vorteile: Sie entfernt zuverlässig Speisereste aus den Zahnzwischenräumen und den Zahnfleischtaschen.

DER ERFRISCHENDE WEG ZUR PERFEKTEN REINIGUNG

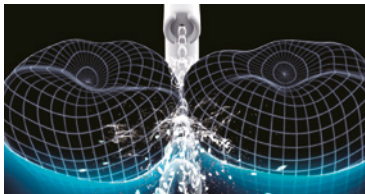


GRÜNDLICHE REINIGUNG DER ZAHNZWISCHENRÄUME

Verwenden Sie Ihre Munddusche immer nach dem Zähneputzen. So reinigen Sie gründlich selbst dort, wo eine Zahnbürste nicht hinkommt. Mit gründlichem Wasserstrahl werden Beläge und Speisereste zuverlässig aus den Zahnzwischenräumen entfernt.




IDEAL FÜR DIE PFLEGE VON BRÜCKEN, KRONEN ODER FESTEN ZAHNSPANGEN

Wie ein kleiner Hochdruckreiniger löst der Wasserstrahl festsitzende Verunreinigungen. Aus diesem Grund sind die Mundduschen auch ideal für die Pflege von Brücken, Kronen oder festen Zahnsparagangen geeignet.

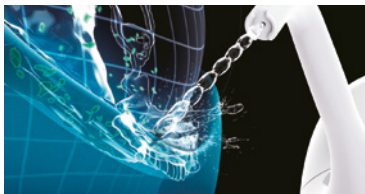

ENTFERNT SCHWIMMENDE PLAQUE IN ZAHNFLEISCHTASCHEN


Das Wasser-Luft-Gemisch mit feinen Luftbläschen sorgt für einen besonders weichen Wasserstrahl. Dadurch kann die sogenannte „schwimmende Plaque“ in den Zahnfleischtaschen entfernt werden.

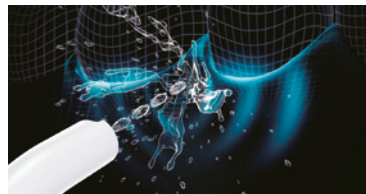

ZAHNFLEISCHPFLEGE MIT ANGENEHM BELEBENDER STIMULATION

Durch die pulsierenden Wasserstrahlen wird das Zahnfleisch perfekt gepflegt. Die feinen Luftbläschen massieren das Zahnfleisch sanft und belebend – und das ganz nebenbei während der Reinigung des Mundraumes.

PRAKTISCH UND HYGIENISCH

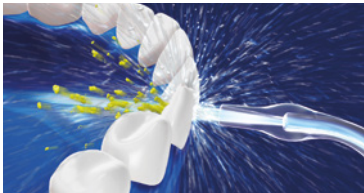


ULTRA SONIC STREAM

Die durch die Ultraschalltechnologie entstehenden Stoßwellen verstärken die Reinigungsleistung des EW1611. Somit werden Nahrungsreste kraftvoll von den Zähnen und aus Zahnzwischenräumen entfernt – auch bei gleichem Wasserdruck.



MAGNETISCHE GRIFFHALTERUNG

Das ergonomisch geformte Handteil mit magnetischer Halterung sorgt für eine einfache Aufbewahrung des EW1611. Sogar der Schlauch findet in einer speziellen Aussparung seinen aufgeräumten Platz.

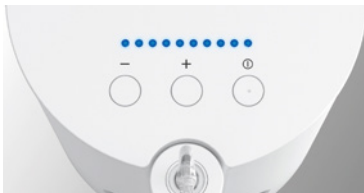

10-STUFIGE WASSERSTRAHLINTENSITÄT

Die Intensität des Wasserstrahls kann ganz genau auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Seine maximale Stärke beträgt 6,25 bar und lässt sich dann in 10 Stufen herunterregeln.



GROSSER WASSERTANK

Der Wasserbehälter umfasst 600 ml und reicht für eine bis zu zweiminütige Nutzung. Der Wassertank kann ganz komfortabel mit warmem Wasser gereinigt werden. Zusätzlich ist er spülmaschinengeeignet.¹

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR IHRE MUNDHYGIENE

Der Wasserstrahl der Panasonic Mundduschen löst Speisereste und fördert durch sanften Massagedruck die Durchblutung des Zahnfleisches. Durch die effektive Wasserstrahl-Technologie wird nicht nur das Zahnfleisch sanft und belebend massiert, sondern auch die sogenannte „schwimmende Plaque“ in den Zahnfleischtaschen sicher entfernt.

EW1611

**Stationäre Munddusche mit
integrierter Ladestation**

Speziell geeignet für die Reinigung der Zahnzwischenräume

Ultra Sonic Stream

entfernt Plaque durch Mikro-Luftblasen noch effizienter

Wasser-Luft-Gemisch

für eine besonders sanfte Reinigung

10-stufige Wasserstrahlintensität

600 ml Wassertank

Wassertank spülmaschinengeeignet¹

Magnetische Griffhalterung

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Weiß

Zubehör

Düsenhalterung und zwei Düsen WEW0982X503



OPTIMALE PFLEGE FÜR DEN STRAHLENDEN AUFTRITT

Panasonic Mundduschen funktionieren kinderleicht: Einfach Wasser einfüllen und los geht es. Die stationären Mundduschen EW1411 und EW1211 entfernen mit fühlbar gründlichem Wasserstrahl in drei Intensitäten zuverlässig versteckte Speisereste. Mit dieser Ergänzung zur elektrischen Zahnbürste optimieren Sie die therapeutische Pflege von Zähnen und Zahnfleisch Tag für Tag.

EW1411

Stationäre Munddusche mit Ladestation

Interdental-Modus

optimiert die Reinigung und spart Wasser

Wasser-Luft-Gemisch

für schonende Reinigung

Abnehmbarer Wassertank

für leichte und hygienische Reinigung

Im Griff integrierter Wassertank

Wassertank spülmaschinengeeignet¹

Einfacher oder pulsierender Wasserstrahl

3-stufige Wasserstrahlintensität

130 ml Tankfüllung

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Silber-Weiß

Zubehör

Ladestation mit Düsenhalterung, zwei Düsen EW0950





INTERDENTAL-MODUS

Für eine konzentrierte Reinigung der Zahnzwischenräume kommt der Wasserstrahl in kurzen Intervallen, zwischen denen die Munddusche weiterbewegt wird.



INTEGRIERTER WASSERTANK

Der im Griff integrierte Wassertank kann für eine hygienische Reinigung komplett abgenommen und so leicht ausgespült werden. Der Wassertank des EW1211 ist zudem spülmaschinengeeignet.¹



3-STUFIGE WASSERSTRAHLINTENSITÄT

Die Bedienung ist ganz einfach. Für eine individuelle Wirkung lässt sich der Wasserstrahl 3-fach regulieren.



EW1211

Stationäre Munddusche mit Ladestation

Wasser-Luft-Gemisch

für schonende Reinigung

Abnehmbarer Wassertank

für leichte und hygienische Reinigung

Im Griff integrierter Wassertank

3-stufige Wasserstrahlintensität

130 ml Tankfüllung

Ergonomisches Design

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Weiß-Blau

Zubehör

Ladestation mit Düsenhalterung, zwei Düsen EW0950



PERFEKTE MUNDHYGIENE IMMER UND ÜBERALL

Sie sind oft auf Reisen und wollen auf umfassende Mundhygiene nicht verzichten? Dann sind diese handlichen Mundduschen für Sie die perfekte Wahl. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und sorgen immer und überall für perfekte Mundhygiene. Diese Mundduschen können Sie auch mit Mundwasser¹ nutzen – für eine noch gründlichere Reinigung, ein frischeres Gefühl und besonders wirksam gegen Mundgeruch.

EW-DJ40

Munddusche mit Ladegerät

Extrem handlich

auf 14 cm zusammenzuschieben

Abnehmbarer Wassertank

für leichte und hygienische Reinigung

Im Griff integrierter Wassertank

Zur Verwendung mit Mundwasser¹

2-stufige Wasserstrahlintensität

165 ml Tankfüllung

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Silber-Weiß

Zubehör

Ladegerät, eine Düse EW0955





ZUSAMMENSCHIEBBAR UND PLATZSPAREND

Der EW-DJ40 und der EW-DJ10 lassen sich für den Transport auf eine Größe von 14 cm zusammenschieben. Die Düse verschwindet im Gerät.



EINFACHE BEDIENUNG

Der Wasserstrahl der EW-DJ40 und der EW-DJ10 lässt sich mit einem Schiebeschalter 2-fach regulieren. Der Batteriebetrieb ist auch auf Reisen ideal.



BESONDERE FRISCHE

Die Reisemundduschen können mit Mundwasser¹ genutzt werden und sorgen so für die besondere Frische.



EW-DJ10

Batteriebetriebene Reisemunddusche

Extrem handlich

auf 14 cm zusammenzuschieben

Abnehmbarer Wassertank

für leichte und hygienische Reinigung

Im Griff integrierter Wassertank

Zur Verwendung mit Mundwasser¹

2-stufige Wasserstrahlintensität

165 ml Tankfüllung

Nur 210 g Gewicht

Farbe: Aquamarin-Weiß

Zubehör

Batterien, eine Düse EW0955





SCHALLZAHNBÜRSTEN FÜR BESTE REINIGUNGSERGEBNISSE


Gesunde Zähne und kräftiges Zahnfleisch sind Ihnen wichtig?
Dann lassen Sie sich von den Vorteilen der Zahnpflege mit einer innovativen
elektrischen Schallzahnbürste von Panasonic überzeugen.

SCHALLTECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE MUNDHYGIENE

Im Unterschied zum Zähneputzen mit der Handzahnbürste ist die Pflege Ihrer kostbaren Zähne mit einer Schallzahnbürste von Panasonic gleichbleibend sicher und schonend. Denn Putztechnik, Bewegung, ausgeübter

Druck und Bewegungs-Frequenz des Bürstenkopfes bleiben konstant auf optimalem Niveau. Panasonic Zahnbürsten mit hochmoderner Schalltechnologie sorgen so für eine optimale Mundhygiene.

SCHÖNE UND GESUNDE ZÄHNE

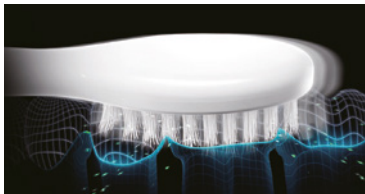


EFFEKTIVE PLAQUE-ENTFERNUNG IN ZAHNFLEISCHTASCHEN

Um verborgene, krankheitserregende Bakterien in Zahnfleischtaschen sicher zu entfernen, bewegen sich die Borsten dicht am Zahnfleischrand und entfernen dort Plaque besonders gründlich.




LINEARMOTOR MIT 31.000 SCHWINGUNGEN PRO MINUTE

Der Bürstenkopf schwingt mit einer Frequenz von ca. 31.000 Schwingungen pro Minute nur rund 1 mm hin und her. Das sorgt für eine gründliche und zugleich angenehme Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.

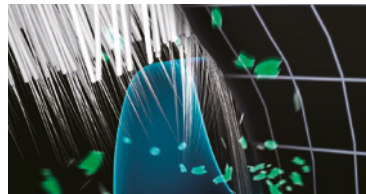

EXTRAFEINE BORSTEN ENTFERNEN AUCH VERSTECKTE PLAQUE

Die feinen, weichen Borstenspitzen haben einen Durchmesser von nur rund 0,02 mm. So reichen sie sogar tief in die Zahnfleischtaschen und entfernen Plaque effektiv und schonend.

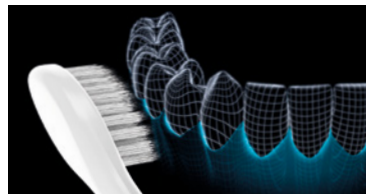

GRÜNDLICH UND SCHONEND FÜR JEDEN ZAHNSTAND

Eine vielfältige Bürstenauswahl bietet für jeden Zahnstand die richtige Pflege. Selbst enge und schwer zugängliche Bereiche im Mund können so effektiv gereinigt werden – für einen frischen Mundraum.



PRAKTISCH UND HYGIENISCH



LADESTANDSANZEIGE UND SCHNELLLADEMODUS

Die Akkuleistung einer Panasonic Schallzahnbürste reicht für viele Reinigungszyklen. Die Ladestandsanzeige informiert präzise über die aktuelle Akkustärke. Mit der exklusiven Schnellladefunktion ist die EW-DL83 in nur einer Stunde komplett aufgeladen.



BESONDERS ERGONOMISCHE FORM

Panasonic Schallzahnbürsten verfügen über ein griffiges Design und sorgen so für eine rutschsichere Handhabung. Die ergonomische Form garantiert zudem eine komfortable Bedienung und sichere Führung der Schallzahnbürste.



ABWASCHBAR

Panasonic Zahnbürsten sowie ihre Ladegeräte sind komplett abwaschbar und lassen sich von oben bis unten ganz leicht reinigen. Zahnpastareste und Kalkablagerungen sind so kein Thema mehr.



TIMER, SOFT-START & DRUCKSCHUTZ

Der 2-Minuten-Timer mit 30-Sekunden-Intervallen sorgt für die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer. Eine Soft-Start-Funktion sorgt für einen sanfteren Putzbeginn. Zum Schutz vor zu viel Druck wird die Intensität der Vibration reduziert, sobald die Zahnbürste zu stark gegen Zähne oder Zahnfleisch gedrückt wird.

ZUR PERFEKTEN REINIGUNG DER ZAHNFLEISCHTASCHEN

Nicht nur die Zahnoberflächen müssen gründlich gereinigt werden: Für eine optimale Zahnpflege sind auch der Zahnfleischsaum und die Zahnfleischtaschen wichtig. Um diese gründlich zu säubern, bewegen sich die Borstenspitzen der EW-DL83 dicht am Zahnfleischrand und entfernen Plaque effektiv.



16YT59



EW-DL83

Schallzahnbürste für gesundes Zahnfleisch

Reinigung der Zahnfleischtaschen

durch weiche, extrafeine Borsten

Schnellladefunktion

2 Min. laden für 2 Min. putzen, 60 Min. laden für 60 Min. putzen

2 Intensitätsstufen

2-Minuten-Putz-Timer mit 30-Sekunden-Intervallen

Linearmotor mit 31.000 Schwingungen pro Minute

Soft-Start-Funktion

Ca. 60 Min. Dauerbetrieb für 2 Wochen Anwendung

Volle Leistung bis zum Neuaufladen

Akku- und Ladestandsanzeige

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Weiß

Zubehör

Reiseetui für 2 Personen, Ladestation, separate Bürstenhalterung für 4 Bürsten, eine Bürste mit extrafeinen Borsten WEW0935, eine Multifunktionsbürste WEW0936 und eine Interdentalbürste EW0940



INTRO

MUNDÜSCHEN

SCHALLZAHNBÜRSTEN

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

MIT CLEVEREN TECHNOLOGIEN EXTRASTARK GEGEN PLAQUE

Für eine zuverlässige Reinigung des Zahnfleischsaums und der Zahnfleischtaschen bewegen sich die Borstenspitzen der Zahnbürste EW-DM81 dicht am Zahnfleischrand und entfernen Plaque damit effektiver. Die Bürste mit extrafeinen und weichen Borstenspitzen gelangt 3 mm weit in die Zahnfleischtaschen, reinigt sie besonders gründlich und schont gleichzeitig den empfindlichen Zahnfleischrand.

EW-DM81

Schallzahnbürste

Reinigung der Zahnfleischtaschen

durch weiche extrafeine Borsten

2 Intensitätsstufen

2-Minuten-Putz-Timer mit 30-Sekunden-Intervallen

31.000 Schwingungen pro Minute

Soft-Start-Funktion

Ca. 30 Min. Dauerbetrieb für 1 Woche Anwendung

Volle Leistung bis zum Neuaufladen

Ladestandsanzeige

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Weiß

Zubehör

Ladestation mit Bürstenhalterung, eine extrafeine Bürste WEW0972,

eine Multi-fit Bürste WEW0974



EXTRASTARKER AKKU PERFEKT FÜR UNTERWEGS

Die EW-DL82 reinigt mit ihrem länglichen Bürstenkopf alle Zahnbereiche intensiv und sanft zugleich. 31.000 Mal in der Minute schwingt der Bürstenkopf um geringe 0,9 mm hin und her. Die EW-DL82 wird wie eine klassische Handzahnbürste gehalten und ist daher für Umsteiger in die gründliche elektrische Zahnhygiene besonders empfehlenswert.



EW-DL82

Schallzahnbürste

- Schutzfunktion bei zu starkem Druck
- 2 Intensitätsstufen
- 2-Minuten-Putz-Timer mit 30-Sekunden-Intervallen

Linearmotor mit 31.000 Schwingungen pro Minute
Soft-Start-Funktion
Ca. 90 Min. Dauerbetrieb für 3 Wochen Anwendung
Volle Leistung bis zum Neuaufladen
Ladestandsanzeige
Automatische Spannungsanpassung
Farbe: Perlweiß

Zubehör

Reiseetui, Ladestation mit Bürstenhalterung,
eine 4-in-1 Bürste mit Zungenreiniger WEW0929



FÜR EINE AUSGEZEICHNETE REINIGUNG DER ZÄHNE

Intensive Reinigungskraft für Einsteiger: Mit 26.000 Schwingungen pro Minute sorgt die EW1031 für restlose Plaque-Entfernung. Dank besonderem Bürstenaufsatz mit extrafeinen Mikroborsten schützt sie gleichzeitig empfindliches Zahnfleisch.

EW1031

Schallzahnbürste

Hochmoderne Schalltechnologie

Kontaktfreie Ladestation für einfache Reinigung

Linearmotor mit 26.000 Schwingungen pro Minute

Ca. 40 Minuten Dauerbetrieb für 10 Tage Anwendung

Volle Leistung bis zum Neuaufladen

Automatische Spannungsanpassung

Farbe: Silber-Weiß

Zubehör

Ein Handstück EW1031, Ladestation mit Halterung

für zwei Bürsten, zwei Bürsten EW0911



SYMBOL-ÜBERSICHT



JET-MODUS

Besonders schnelle, konzentrierte Reinigung der Zahnzwischenräume durch den kontinuierlichen Wasserstrahl des JET-Modus.



INTENSITÄTSSTUFEN

Die Reinigungsintensität der Schallzahnbürste lässt sich nach persönlichen Vorlieben in Stufen anpassen.



SOFT-MODUS

Der Soft-Modus ist ideal bei empfindlichen Zahnhälsen und Zahnfleisch und sorgt dabei für ein brillantes Ergebnis.



PUTZ-TIMER

Sorgt für die empfohlene 2-Minuten-Pflege und erinnert in 30-Sekunden-Intervallen an die richtige Versorgung der jeweiligen Mundraum-Bereiche.



BETRIEBSZEIT

Die lange Akku-Betriebszeit sorgt jederzeit für eine zuverlässige Bereitschaft und ermöglicht auch problemlos den Einsatz auf Reisen.



LINEARMOTOR

Der Linearmotor mit bis zu 31.000 Schwingungen/Minute sorgt für eine gründliche und zugleich angenehme Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.



AUTOMATISCHE SPANNUNGSANPASSUNG

Egal, wohin die Reise führt: Panasonic Produkte passen sich der jeweiligen Netzspannung automatisch an.



ERSATZBÜRSTEN

VIelfÄLTIGE BÜRSTENAUSWAHL FÜR DIE PERFEKTE ANPASSUNG AN IHREN MUNDRAUM

Die Lage der Zähne, die Zahnzwischenräume, die Empfindlichkeit der Zahnhälse und der Zustand des Zahnfleisches variieren.

Bei Panasonic wählen Sie die passende Bürste für Ihre ganz persönliche Mundhygiene.

Alle Ersatzbürsten – mit Ausnahme der beiden Ersatzbürsten WEW0972 und WEW0974 für die EW-DM81 – sind kompatibel mit sämtlichen Panasonic Schallzahnbürsten. Für eine perfekte Pflege empfehlen wir bei regelmäßiger Nutzung einen Austausch der Bürstenköpfe nach 2–3 Monaten.



**BÜRSTE MIT EXTRAFEINEN,
WEICHEN BORSTEN WEW0972
FÜR SCHALLZAHNBÜRSTE EW-DM81**

Extrafeine und besonders weiche Borsten zur sanften Reinigung der Zahnfleischtaschen und des sensiblen Zahnfleischsaums.



**MULTIFUNKTIONSBÜRSTE
WEW0974 FÜR
SCHALLZAHNBÜRSTE EW-DM81**

Längere Borsten in der Mitte und an den Enden sorgen für eine gleichzeitige Reinigung von Zahnoberflächen und -zwischenräumen.



5-IN-1 BÜRSTE WEW0908

3 verschiedene Borstenarten und der Zungenreiniger sorgen für eine effektive Reinigung, Reduzierung von Verfärbungen und frischen Atem.



**BÜRSTE MIT EXTRAFEINEN,
WEICHEN BORSTEN WEW0935**

Extrafeine und besonders weiche Borsten zur sanften Reinigung der Zahnfleischtaschen und des sensiblen Zahnfleischsaums.



**MULTIFUNKTIONSBÜRSTE
WEW0936**

Längere Borsten in der Mitte und an den Enden sorgen für eine gleichzeitige Reinigung von Zahnoberflächen und -zwischenräumen.



4-IN-1 BÜRSTE WEW0929

3 verschiedene Borstenarten und der Zungenreiniger sorgen für eine effektive Reinigung, Reduzierung von Verfärbungen und frischen Atem.



**BÜRSTE MIT EXTRAFEINEN
MIKROBORSTEN EW0911**

Mikrofeine Borstenenden für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.



PRÄZISIONSBÜRSTE EW0925

Perfekte Anpassung auch an unebene Zahnoberflächen durch längere Randborsten.



**BÜRSTE MIT ZICK-ZACK-BORSTEN
EW0923**

Mikrofeine Zick-Zack-Borsten für eine leichte Reinigung schwer erreichbarer Zwischenräume. Federgelagerte Borsten schonen Zähne und Zahnfleisch.

INTRO

MUNDÜSCHEN

SCHALLZAHNBÜRSTEN

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN



SCHONENDE FEDERKERNBÜRSTE EW0920

Intensive und doch schonende Reinigung durch auf Federn gelagerte Borsten. Zick-Zack-Borsten reinigen auch schwer erreichbare Zwischenräume.



KINDERBÜRSTE EW0942

Kleiner, gummierter Bürstenkopf mit weichen Borsten. Ideal für kleine Kinderzähne und -münder.



EFFEKTIVE DREIKOPFBÜRSTE EW0900

Gründliche Reinigung aller Zahnflächen gleichzeitig. Besonders empfehlenswert für die hinteren Backenzähne oder bei Kindern und Menschen mit Bewegungseinschränkungen.



ZAHNFLEISCHMASSAGE-BÜRSTE EW0931

Gummibeschichtete Bürsten zur kräftigenden Massage von Zahnfleisch und Gaumenbereich.



INTERDENTAL-BÜRSTE EW0940

Zapfenförmige Bürste zur gründlichen Reinigung tiefer gelegener Zahnzwischenräume.

ERSATZDÜSEN

Panasonic Mundduschen sorgen für eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume und damit für eine perfekte Mundhygiene. Für lange Freude an Ihrer Munddusche sind Original-Ersatzdüsen von Panasonic erhältlich.



ERSATZDÜSE WEW0982X503

Diese Ersatzdüse ist geeignet für die Munddusche EW1611 für eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume.



ERSATZDÜSE EW0950

Diese Ersatzdüse ist geeignet für die Munddusche EW1211 für eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume.



ERSATZDÜSE EW0955

Diese Ersatzdüse ist geeignet für die Reisemundduschen EW-DJ40 und EW-DJ10 für eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume.

MUNDDUSCHEN

	EW1611	EW1411	EW1211	EW-DJ40	EW-DJ10
Katalogseite	9	10	11	12	13
Typ	Stationäre Munddusche mit integrierter Ladestation	Stationäre Munddusche mit Ladestation	Stationäre Munddusche mit Ladestation	Tragbare Munddusche	Batteriebetriebene Reisemunddusche
EAN Code	5025232864621	5025232864636	5025232687978	5025232538492	5025232527502
Farbe	Weiß	Silber-Weiß	Weiß-Blau	Silber-Weiß	Aquamarin-Weiß
Stromversorgung	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku	2 x 1,5 V Alkalibatterien
Betriebsdauer	ca. 120 Sek.	ca. 60 Min. (Interdental-Modus), ca. 15 Min. (Normal-, Wasser-Luft-Gemisch-Modus)	ca. 15 Min. (Normal-, Wasser-Luft-Gemisch-Modus)	ca. 15 Min. (Stufe 2)	ca. 20 Min. (Stufe 2)
Ladezeit	–	ca. 15 Std.	ca. 15 Std.	ca. 8 Std.	–
Anzahl Programme	10	4	3	2	2
Pumpfrequenz	1.900 Impulse/Min.	1.400 Impulse/Min.	1.400 Impulse/Min.	1.500 Impulse/Min.	1.400 Impulse/Min.
Wasserstrahlintensität	10-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig
Wassertank	In der Ladestation integriert und abnehmbar	Im Griff integriert und abnehmbar	Im Griff integriert und abnehmbar	Im Griff integriert und abnehmbar	Im Griff integriert und abnehmbar
Tankvolumen	600 ml	130 ml (für ca. 120 Sek. Nutzung im Interdental-Modus bzw. 35 Sek. im Normal-, Wasser-Luft-Gemisch-Modus)	130 ml (für ca. 35 Sek. Nutzung im Normal-, Wasser-Luft-Gemisch-Modus)	165 ml (für ca. 40 Sek. Nutzung in Stufe 2)	165 ml (für ca. 40 Sek. Nutzung in Stufe 2)
Gewicht	956 g	305 g (Munddusche mit Düse), 187 g (Ladestation)	305 g (Munddusche mit Düse), 187 g (Ladestation)	265 g (Munddusche mit Düse), 145 g (Ladegerät)	252 g (Munddusche mit Düse und Batterien)
Maße B x H x T (mm)	125 x 195 x 140 (Munddusche in der Station ohne Düse)	59 x 197 x 75 (Munddusche ohne Düse), 93 x 40 x 98 (Ladestation)	59 x 197 x 75 (Munddusche ohne Düse), 93 x 40 x 98 (Ladestation)	51 x 142 x 68 (zusammengeschoben, ohne Düse), 51 x 218 x 68 (auseinandergezogen, ohne Düse)	51 x 142 x 68 (zusammengeschoben, ohne Düse), 51 x 218 x 68 (auseinandergezogen, ohne Düse)
Zubehör	Düsenhalterung und 2 Düsen WEW0982X503	2 Aufsteckdüsen EW0950, Ladestation mit Halterung für 2 Düsen	2 Aufsteckdüsen EW0950, Ladestation mit Halterung für 2 Düsen	Aufsteckdüse EW0955, Ladegerät	Aufsteckdüse EW0955, 2 Batterien



SCHALLZAHNBÜRSTEN

		EW-DL83	EW-DM81	EW-DL82	EW1031
ALLGEMEINES	Katalogseite	17	18	19	20
	Typ	Schallzahnbürste	Schallzahnbürste	Schallzahnbürste	Schallzahnbürste
	EAN Code	5025232840526	5025232846153	5025232740901	5025232687961
	Farbe	Weiß	Weiß	Perlweiß	Silber-Weiß
	Stromversorgung	Schnellladefunktion (1 Std. für 100%) Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) Li-Ionen-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) Li-Ionen-Akku	Automatische Spannungsanpassung (100–240 V, 50/60 Hz) NiMH-Akku
	Betriebsdauer	ca. 60 Min. Dauerbetrieb (2 Wochen Anwendung)	ca. 30 Min. Dauerbetrieb (1 Woche Anwendung)	ca. 90 Min. Dauerbetrieb (3 Wochen Anwendung)	ca. 40 Min. Dauerbetrieb (10 Tage Anwendung)
	Ladezeit	ca. 60 Min.	ca. 17 Std.	ca. 17 Std.	ca. 15 Std.
	Putz-Timer	•	•	•	—
	Anzahl Programme	2	2	2	1
	Schwingungen/Min.	31.000	31.000	31.000	26.000
SPEZIFIKATION	Linearmotor	•	—	•	•
	Gewicht	100 g (Zahnbürste mit Aufsatz), 235 g (Ladestation)	55 g (Zahnbürste mit Aufsatz), 145 g (Ladestation)	84 g (Zahnbürste mit Aufsatz), 141 g (Ladestation)	116 g (Zahnbürste mit Aufsatz), 145 g (Ladestation)
	Maße B x H x T (mm)	26 x 169 x 31 (Zahnbürste ohne Aufsatz), 65 x 72 x 70 (Ladestation)	23 x 144 x 27 (Zahnbürste ohne Aufsatz), 47 x 42 x 77 (Ladestation)	23 x 144 x 27 (Zahnbürste ohne Aufsatz), 47 x 42 x 77 (Ladestation)	25 x 169 x 33 (Zahnbürste ohne Aufsatz), 44 x 47 x 80 (Ladestation)
	Zubehör	Reiseetui für Zahnbürste und 2 Bürstenaufsätze, Ladestation, separate Halterung für 4 Bürsten, Bürstenaufsatz mit extra- feinen Borsten WEW0935, Multifunktionsbürste WEW0936 und Interdentalbürste EW0940	Ladestation mit Halterung für 1 Bürste, eine extrafeine Bürste WEW0972, eine Multi-fit Bürste WEW0974	Reiseetui für Zahnbürste und 1 Bürstenaufsatz, Ladestation mit Halterung für 1 Bürste, 4-in-1 Bürste WEW0929	Ladestation mit Halterung für 2 Bürstenaufsätze, 2 Bürsten EW0911

INTRO

MUNDÜSCHEN

SCHALLZAHNBÜRSTEN

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Service-Hotline:
040-55 55 88 55¹
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17
1190 Wien
Service-Hotline:
01-2 67 60 67¹
www.panasonic.at

Panasonic

EXPERIENCE

experience.panasonic.de

LUMIX **G** | Experience

lumixexperience.panasonic.de



Werden Sie Fan bei
facebook.com/Panasonic.Deutschland
facebook.com/Lumix.Deutschland

oder folgen Sie uns auf
twitter.com/panasonicDE
youtube.com/panasonic
google.de/+PanasonicDeutschland
pinterest.com/panasonicDE
instagram.com/panasonic_de
flickr.com/lumix-deutschland

¹ Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen).
Erreichbarkeit: Montag–Freitag 08:00–20:00 Uhr, Samstag 12:00–17:00 Uhr.

Stand 08 / 2018 Printed in Germany. Zumutbare Abweichungen in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen zur Anpassung an den neuesten Stand der Technik und Produktion bleiben ausdrücklich vorbehalten.