

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

(အိမ်တွင်သုံးရန်) အိုင်ယွန်ဖြည့်မျက်နှာပေါင်းတင်စက်

မော်ဒယ်နံပါတ်. **EH-SA31**



ဤစက်ကိုအသုံးပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည့်စုံစာဖတ်၍နောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

ပန်နာဆိုးနှစ်အိုင်ယွန်ပြည့်မျက်နှာပေါင်းတင်စက်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စက်ကိုအသုံးမပြုမီအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်သတိပေးချက်များ

ဤစက်အားမှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အသုံးမပြုမီဘေးကင်းလုံခြုံမှုသတိပေးချက်အားလုံးကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်သတိပေးချက်များသည်စက်ကိုမှန်ကန်စွာနှင့်လုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီပေး၍မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများအားအန္တရာယ်ဖြစ်မှုအပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်သတိပေးချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာ

ဤအရေးကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအမြဲလိုက်နာပါ။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် :

ဤမှာကြားချက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ်များနှင့်အခြေအနေများကိုညွှန်ပြပြီးအကယ်၍ရောင်ကြည့်ခြင်းမရှိပါကအသက်ဆုံးရှုံးခြင်း(သို့)ကြီးမားသောဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက် :

ဤမှာကြားချက်သည်အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ်များနှင့်အခြေအနေများကိုညွှန်ပြပြီးအကယ်၍ရောင်ကြည့်ခြင်းမရှိပါကအန္တရာယ်ဖြစ်မှု(သို့)ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် :

- ဤစက်ကိုရေချိုးကန်၊ ပန်းကန်ဆေးကန်(သို့)ရေဖြည့်ထားသောကန်များအနီးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အပူဒဏ်မခံနိုင်သောသူများစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကအပူကျွမ်းခြင်း(သို့)အပူလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- မျက်နှာထိန်းသိမ်းရန်မှလွှဲ၍အခြားအသုံးပြုမှုများအတွက်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 - ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကအပူကျွမ်းခြင်း(သို့)အပူလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း(သို့)ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- အရေပြား(သို့)ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်နှာကျင်မှုများ(သို့)မူမမှန်ခြင်းများခံစားရပါကအသုံးပြုမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပါ။
အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤစက်ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
 - ကိုယ်ဝန်ဆောင်(သို့)လက်ရှိဓမ္မတာလောနေသောအမျိုးသမီးများ။
(ဟော်မုန်းမညီမျှကြောင့်အရေပြားပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)
 - ဓာတ်မတည့်သူများ။
 - အရေပြားရောဂါများ၊ အရေပြားရောင်ရမ်းခြင်း(သို့)ထိခိုက်လွယ်သောအရေပြားရှိသူများ။
 - အရေပြားဒဏ်ရာရခြင်း၊ နှင်းခုနားဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားရောင်တိုင်းခြင်း၊ ဖြစ်သည့်သူများ။
 - ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကအရေပြား(သို့)ခန္ဓာကိုယ်တွင်ပြဿနာများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် :



- ပလပ်ခေါင်း (သို့) စက်ပလပ်ခေါင်းကို ပြုတ်သည့်အခါ ပလပ်ခေါင်း၏ ကိုယ်ထည်ကို ကိုင်ထားပါ။
(ပလပ်ခေါင်းပေါ်ရှိ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို မထိပါနှင့်။)
စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်သည့်အခါ ပလပ်ပြုတ်ပါ။
- ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆ ထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရ ဖြစ်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။
- စက်ကို အသုံးမပြုသည့်အခါ ပါဝါပိတ်၍ ပလပ်ကို ပြုတ်ပါ။
- ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း (သို့) ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။
- ပလပ်ခေါင်းနှင့် စက်ပလပ်ခေါင်းတွင် ဖုန်များ မရှိစေရန် အခါအားလျော်စွာ သန့်ရှင်းပါ။
- စိုထိုင်းမှုစသည့်တို့ကို လျှပ်ကာပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- စက်နှင့် သက်ဆိုင်သော မီးကြိုးကို အမြဲအသုံးပြုပါ။ ထို့အပြင် အခြားစက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော မီးကြိုးကို မသုံးပါနှင့်။
- ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်နိုင်သည်။
- စက်ကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ မီးကြိုးကို စက်ပတ်ပတ်လည်တွင် မရစ်ပတ်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက မီးကြိုးပုံပျက်ခြင်း နှင့် စက်ပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
- စက်ပေါ်ရှိ ဖော်ပြထားသော သက်မှတ်စဉ်အား နှင့် တိုက်ညီသော လျှပ်စစ်ပမာဏကိုသာ စက်တွင် အမြဲအသုံးပြုပါ။
ပလပ်ခေါင်းနှင့် စက်ပလပ်ခေါင်းကို သေချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။
- ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်း (သို့) အပူလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
- အောက်ပါ အခြေအနေများတွင် စက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - မီးကြိုး (သို့) ပလပ်ခေါင်း ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပူလာခြင်း ဖြစ်သည့်အခါ။
 - ပလပ်ခေါင်းသည် ပလပ်ခုံတွင် ချောင်နေသည့်အခါ။
 မီးကြိုးကို ပျက်စီးခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အလွန်အကျွံ ကျွေးခြင်း၊ သွေခြင်း (သို့) လိမ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
မီးကြိုးပေါ်တွင် လေးလံလသော အရာဝတ္ထုများကို မတင်ပါနှင့်။ အရာဝတ္ထုများ အကြားတွင် မီးကြိုးကို မညှပ်ပါနှင့်။
စက်ပလပ်ခေါင်း၏ အစွန်းတွင် ပင်များ၊ ဖုန်မှုန့်များ မကပ်ပါစေနှင့်။
- ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို ဖြစ်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်း (သို့) အပူလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
- ပလပ်ခေါင်းနှင့် စက်ပလပ်ခေါင်းကို ပလပ်ခုံတွင် ရေစိုသော လက်များဖြင့် တပ်ခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ထို့အပြင် စက်ကို ရေစိုသော လက်ဖြင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက ရှောင်ခြင်း (သို့) လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတို ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက် :

ပြန်

- စက်ကို ရေချိုးကန် (သို့) အစီအစဉ်ပြင်သော အခန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ စက်ကို ရေစို နိုင်သော နေရာ (ပန်ကန်ဆေးသည့်ဘေစင်ဘေး) တွင် မထားပါနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက လျှပ်ကာပစ္စည်း ယိုယွင်းခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမီသော နေရာများတွင် မထားပါနှင့်။ ကလေးငယ်များအား စက်ကို အသုံးမပြုပါစေနှင့်။ ကလေးအား စက်ကို လျှာဖြင့် မလျှက်ပါစေနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း (သို့) အပူလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်ကို ပေါက်ကွဲလွယ်သော အရာဝတ္ထုများ (အရက်ပြန်၊ တင်နာ၊ ဝန်ဇင်း၊ ကြွေရည်ဖျက်ဆေး၊ လေမှုတ်ဆေးစသည်) အနီးတွင် မသုံးပါနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက ပေါက်ကွဲခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်ကို ရေထဲတွင် မနှစ်ပါနှင့်။ စက်တွင် ရေဖြည့်ရန် ဓာတ်ငွေ့ကို သုံး၍ ဓာတ်ငွေ့ကို ရေဖြည့်သည့် အခါ စက်နှင့် ပါဝါခလုတ်ကို ရေမစိုပါစေနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုဖြစ်ခြင်း (သို့) အပူကျွမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်ကို ပြုတ်ကျခြင်း၊ တိုက်မိခြင်း၊ မရှိပါစေနှင့်။ အကယ်၍ စက်အား ပြုတ်ကျခြင်း (သို့) တိုက်မိခြင်း ရှိပါက ဆက်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်၏ ရေခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်တွင် ပင်များ၊ ပါယာများ၊ အခြားပြင်ပအရာဝတ္ထုများ ကဲ့သို့ သတ္တုဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုများ မဝင်ပါစေနှင့်။ ရေခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ပါနှင့်။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- စက်ကို ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ စက်ကို ဝယ်ယူခဲ့သော ဆိုင် (သို့) တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ပန်နာဆိုးနစ် ဆားပစ်စင်တာနှင့် ဆက်သွယ်၍ ပြုပြင်ပါ။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း (သို့) မူမမှန်သော အသုံးပြုမှုကြောင့် အနာတရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက် :

- စက်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် ရေသွန်သည့်အခါ စက်ကို ကိုင်ထားပါ။ သို့မှသာ လက်သည် ရေပူနှင့် မထိမည် ဖြစ်သည်။
 - စက်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် ဓာတ်ဘူး၏ အပူချိန်ကို သတိပြုပါ။
 - ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။
- ပေါင်းခံထားရေ (သို့) ရေသန့်ကို သာအသုံးပြုပါ။
 - ထိုသို့ မပြုလုပ်ပါက ကိရိယာချွတ်ယွင်းခြင်း (သို့) အချို့ပြင်းထန်သော ကိစ္စများတွင် အပူကျွမ်းခြင်း (သို့) အပူလောင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

⚠ သတိပေးချက် :

- ပါဝါသလုတ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ရေခဲခွေးငွေ့နှင့် လက်ကို ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။ ပိုက်ခေါင်းမှ မျက်နှာနှင့် လက်ကို အနည်းဆုံး ၂၀ စင်တီမီတာအကွာတွင်ထားပါ။
- စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်နှင့် အသုံးပြုပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အတွင်း စက်ကို စောင်းခြင်း၊ လှုပ်ခြင်း (သို့) ရွှေ့ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက ရေပူများ ထွက်ကျက ရေခဲခွေးငွေ့များသည် ရေခဲခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်မှ ထွက်လာနိုင်သည်။
- စက်ကို ညီညာပြန်ပြုသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အသုံးပြုပါ။ လက်တွင် ကိုင်၍ အသုံးပြုရန် အတွက် မဟုတ်ပါ။
- စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ်နှင့် အသုံးပြုပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အတွင်း ဓာတ်ဘူးကို တပ်ခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ စက်ကို အသုံးပြုနေစဉ် ရေခဲခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်ကို ထိခြင်း (သို့) အတွင်းသို့ ကြည့်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်တွင် (၁ မိနစ်ခန့်) ရေခဲခွေးငွေ့များသည် ဆက်၍ ထွက်လာနိုင်သည်။ စက်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် ရေခဲခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်နှင့် အဝေးတွင် နေပါ။
- စက်သန့်ရှင်းသည့်အချိန်မှ လွဲ၍ စက်ထဲတွင် ရေရှိနေသည့်အခါ စက်ကို မလှုပ်ပါနှင့်။
- ရေခဲခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်မှ တစ်ဆင့် ရေများ မထွက်ပါစေနှင့်။
- ထိုသို့ ပြုလုပ်ပါက ရေခဲခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်တွင် ရေစက်များ စုပုံလာခြင်းကြောင့် ပါဝါဖွင့်သည့်အခါ ရေပူများ ထွက်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပူကျွမ်းခြင်း (သို့) အပူလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ဤစက်အား (ကလေးများ အပါအဝင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ အမြင်အာရုံ (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူမှ စက်၏ အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်မှု (သို့) လမ်းညွှန်ချက် မရရှိထားသော အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတ နည်းသူများ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ကလေးငယ်များအား ဤစက်နှင့် ဆော့ကစားခြင်း မပြုရန် ကြီးကြပ်သင့်သည်။
- စက်အား အသုံးပြုပြီးသည့်နောက် ဆီနှင့် အခြားအကြွင်းအကျန်များ စုပုံခြင်း မဖြစ်စေရန် စက်ကို သန့်ရှင်းသင့်သည်။




အသားအရောင်ပတ်သက်သော အရေးကြီးသတိပေးချက်များ

- စက်ကို အလွန်အကျွံ အသုံးပြုခြင်းသည် အသားအရေကို ထိခိုက်စေပါသည်။
အစပိုင်းတွင် စက်ကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်သာ၊ တစ်ပတ်လျှင် အများဆုံး နှစ်ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်အထိသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ စက်အသုံးပြုမှုတစ်လခန့် ကြာပြီးနောက်တွင် စက်ကို နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်အသားအရေအခြေအနေကို လေ့လာစဉ် ကြိမ်နှုန်းနှင့် အချိန်ကို ချိန်ညှိပါ။
 - ရေခဲခွေးငွေ့ကို အသုံးပြုစဉ် အသားအရေပြဿနာ ဖြစ်ပါက စက်အသုံးပြုမှုကို ရပ်ပါ။
 - ရေခဲခွေးငွေ့ကို အသုံးပြုပြီးနောက် ပုံမှန် အသားအရေထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ရေခဲခွေးငွေ့ကို အသုံးပြုပြီးနောက် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို မပြုလုပ်ပါက အသားအရေပေါ်ရှိ အစိုဓာတ်သည် အလွယ်တကူ အငွေ့ပြန်၍ အသားအရေကို ခြောက်စေပါသည်။


အစိတ်အပိုင်းများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

မြန်မာ


က

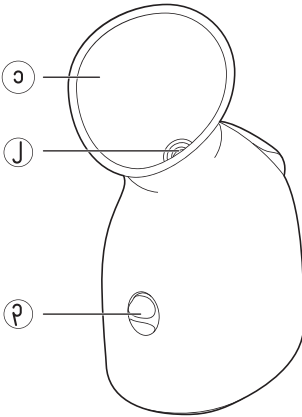

အရှေ့ဘက်

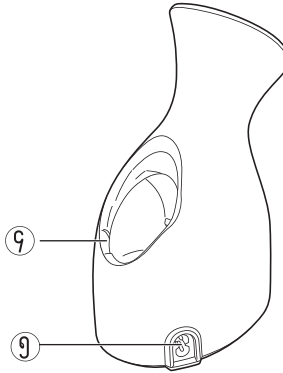


အနောက်ဘက်

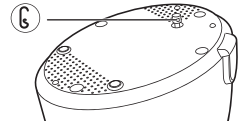


အောက်ခြေ

ခ

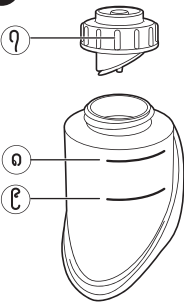

ဂ

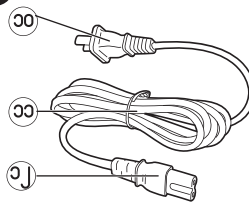

က

စက်

- ၁ ပိုက်ခေါင်း
- ၂ ရေနွေးငွေ့ထွက်ပေါက်
- ၃ ပါဝါခလုတ်
- ၄ ရေထွက်ပေါက်
- ၅ စက်ပလပ်ခုံ
- ၆ ရေထွက်သည့်ခလုတ်

ခ

ဓာတ်ဘူး

- ၇ ဓာတ်ဘူးအဖုံး
- ၈ “အပြည့်” အမှတ်
- ၉ “တစ်ဝက်” အမှတ်

ဂ

မီးကြိုး


- ၁၀ ပလပ်ခေါင်း
- ၁၁ ကြိုး
- ၁၂ စက်ပလပ်ခေါင်း

- ပလပ်ခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်သည် နေရာဒေသအပေါ်လိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
- စက်အား ပထမအကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ ဓာတ်ဘူးဘေပတ်လည်တွင် ရေများကျန်ရှိနေနိုင်သည်။ ထိုရေများသည် စက်ရုံတွင် စစ်ဆေးရန် အတွက် အသုံးပြုသော ရေအကြွင်းအကျန်များ ဖြစ်၍ ရေဆိုးနှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာများ မဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ပြင်ဆင်ခြင်း

- ၁** စက်ကို ညီညာပြန်ပြူးသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားပါ။
- စက်ကို အသုံးပြုစဉ် စာဖွဲ့စောင်းကဲ့သို့ ညီညာပြန်ပြူး၍ ခိုင်ခံ့သော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထားပါ။ စက်အသုံးပြုနေစဉ် စက်ကို လက်ထဲတွင်မကိုင်ထားပါနှင့်။
 - အကယ်၍ စက်သည် ထောင်မတ်သော အနေအထားတွင် မရှိပါက ဓာတ်ဘူးသည် စက်ကို ရေမထောက်ပံ့နိုင်၍ စက်သည် ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

- ၂** ဓာတ်ဘူးကို စက်မှ ဖြုတ်ပါ။
- ဓာတ်ဘူးကို အပေါ်သို့ ဆွဲ၍ ဖြုတ်ပါ။

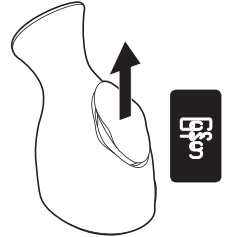

- ၃** ဓာတ်ဘူးအဖုံးကို လှည့်၍ ဖွင့်ပါ။

- ၄** ဓာတ်ဘူးထဲသို့ ရေဖြည့်၍ ဓာတ်ဘူးအဖုံးကို ပိတ်ပါ။


- ရေသည် “အပြည့်” အမှတ်သို့ ဖြည့်ထားသည့် အခါ ရေနွေးငွေ့သည် မီနစ်ခန့် ထွက်လာမည်ဖြစ်ပြီး “တစ်ဝက်” အမှတ်သို့ ဖြစ်သည့် အခါ ၃ မီနစ်ခန့် ထွက်လာပါမည်။



- ၅** ဓာတ်ဘူးမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရေများကို သုတ်ပါ။

- ၆** ဓာတ်ဘူးကို စက်တွင် တပ်ပါ။

- ဓာတ်ဘူးကို စက်ထဲသို့ ချက်ကနဲ အသံကြားသည့် အထိ တွန်းထည့်ပါ။
- ဓာတ်ဘူးကို စက်ထဲတွင် တပ်သည့် အခါ စက်အတွင်းသို့ ရေများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဓာတ်ဘူးရှိ ရေများ လျော့သွားသည်။
- အကယ်၍ ဓာတ်ဘူးအား အကြိမ်ကြိမ် တပ်ခြင်း (သို့) ဖြုတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါက ရေထွက်ပေါက်မှ ရေများ ယိုစိမ့်လာနိုင်သည်။

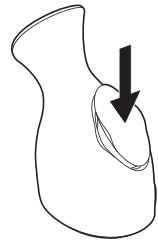

ပေါင်းခံထားသည့် ရေ (သို့) သန့်စင်ထားသော ရေကိုသာ သုံးပါ။ စက်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ရေအရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍ သက်တမ်းတိုးနိုင်သောကြောင့် ပေါင်းခံရေ (သို့) အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သီးသန့် ဝယ်ယူပါ။

အောက်ပါရေအမျိုးအစားများသည် သတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုများသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

- ဘုံပိုင်ရေ
- တွင်းရေ
- ရေပူစမ်းမှရေ
- အက်ဆစ်ပါသောရေ
- မြေအောက်ရေ
- အိုင်ယွန်ပြည့်အယ်ကာလီရေ

အခြားအရာများနှင့် မရောပါနှင့်။

ရေကို လိုးရှင်း၊ အလှဆီကဲ့သို့ အခြား အရာဝတ္ထုများနှင့် မရောပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းခြင်း၊ စက်ချွတ်ယွင်းခြင်း (သို့) စက်၏ သက်တမ်းတိုခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

နိဂုံး

ပေါင်းတင်စက်ကို အသုံးပြုပုံ

၁ စက်ပလပ်ခေါင်းကို စက်တွင်းထိုးထည့်ပါ။

၂ ပလပ်ခေါင်းကို ပါဝါပလပ်ခုံတွင် ပလပ်ထိုးပါ။




၃ စက်ဖွင့်ရန် ပါဝါခလုတ်ကို အပေါ်သို့ တွန်းပါ။

ရေခွေးငွေ့သည် ၁ မိနစ်ခန့် ကြာပြီးနောက် ထွက်လာသည်။

- ဝှီးကနဲ အသံမြည်သံကြားရပါမည်။ ထိုအသံသည် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်သော အသံဖြစ်၍ ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။
- စက်သည် ရေခွေးငွေ့စတင်ထုတ်လွှတ်သည့်အခါ ရေပူအနည်းငယ် ထွက်လာနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် စက်ချွတ်ယွင်းခြင်း မဟုတ်ပါ။

၄ ရေခွေးငွေ့ကို မျက်နှာနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အောင် ထားပါ။

- မျက်နှာကို ပိုက်ခေါင်းမှ အနည်းဆုံး ၂၀ စင်တီမီတာ အဝေးတွင် ထားပါ။
- စက်ကို ပထမဆုံး အကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ (သို့) အကွာအဝေးကို ခန့်မှန်းရန် ခတ်သည့်အခါ ပိုက်ခေါင်းနှင့် ရေခွေးငွေ့ထိတွေ့ရမည့် နေရာတို့အကြားရှိ မှန်ကန်သော အကွာအဝေးကို သက်မှတ်နိုင်ရန် ပူးတွဲပါဝင်သော “အကွာအဝေးလမ်းညွှန်” ကို ဖတ်ပါ။
- ရေခွေးငွေ့သည် မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ထိတွေ့စေရန် မေးစေ၏ ထိပ်သို့ ရေခွေးငွေ့ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အောင် ထားပါ။

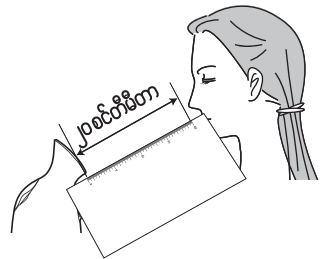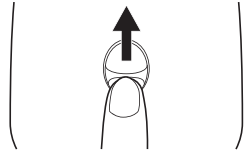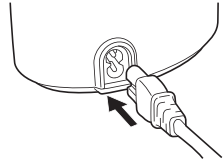


ရေသည် “အပြည့်” အမှတ်သို့ဖြည့်ထားသည့်အခါ ရေခွေးငွေ့သည် ၆ မိနစ်ခန့်ထွက်ပြီးနောက်ရပ်သွား၍ “တစ်ဝက်” အမှတ်သို့ဖြည့်ထားသည့် အခါ ၃ မိနစ်ခန့်ထွက်ပြီးနောက်ရပ်သွားပါသည်။ (ရေခွေးငွေ့ထွက်သည့်ကြာချိန်သည် ဖြည့်ထားသည့်ရေပမာဏအပေါ်မူတည်၍ပြောင်းလဲပါသည်။)

- ကျန်ရှိနေသောရေပမာဏနည်းနေပါက ရေခွေးငွေ့ထွက်သည့်နည်းလမ်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
- အကယ်၍ ဘူးတွင်ရေမရှိပါက ရေခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်မှ ရေခွေးငွေ့များထွက်မည်မဟုတ်ပါ။ စက်ကိုပိတ်၍ အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်ကြာ အအေးခံပြီးနောက်ရေထည့်ပါ။

၅ စက်ပိတ်ရန် ပါဝါလုတ်ကို အောက်သို့ရွေ့ပါ။

- စက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက် အသားအရေကို လိုရှင်းလိမ်း၍စိုပြေစေခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိန်းသိမ်းပါ။ မထိန်းသိမ်းပါက အသားအရည်အတွင်း ရှိရေငွေ့ပျံ့ကာ အသားအရည်ခြောက်သွေ့စေပါသည်။

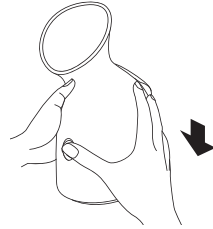

စက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်

- စက်အားအသုံးပြုပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အတွင်း စက်ကိုစောင်းခြင်း၊ လှုပ်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- စက်အားအသုံးပြုပြီးတိုင်း ဓာတ်ဘူးနှင့်စက်အတွင်းရှိရေများကိုသွန်းပါ။

ထိုသို့မပြုလုပ်ပါက ရေအညစ်အကြေးများ (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်သော အနံ့များထွက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၁ စက်ကိုအနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်ခန့် အအေးခံပါ။

၂ ပါဝါပလပ်ဆုံမှပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။



၃ စက်မှပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။

၄ စက်မှဓာတ်ဘူးကိုဖြုတ်ပါ။

- ဓာတ်ဘူးကိုအပေါ်သို့ဆွဲဖြုတ်ပါ။
- ဓာတ်ဘူးမှရေများထွက်လာနိုင်သောကြောင့် ဓာတ်ဘူးကိုရေလုံသောနေရာတွင်ဖြုတ်ပါ။

၅ ဓာတ်ဘူးအတွင်းရှိရေများကိုသွန်းပါ။


- ဓာတ်ဘူး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှရေများကိုသုတ်ပါ။

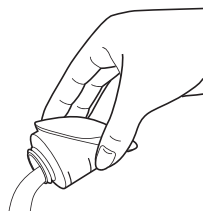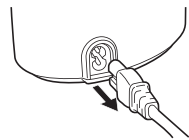

၆

စက်အတွင်းရှိရေများကိုသွန်းပါ။

- စက်၏အောက်ခြေရှိရေထွက်သည့်ခလုတ်ကိုတွင်းဖွင့်သည့်အခါရေပြောင်းများ၏လားရာအတိုင်းရေထွက်ပေါက်မှရေများကိုသွန်းပါ။
- ရေသွန်းသည့်အခါလက်များသည်ရေပူနှင့်မထိစေရန်စက်ကိုကိုင်ထားပါ။ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကအပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။

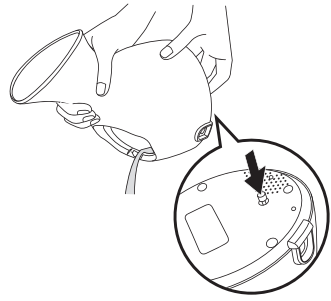


မြန်မာ

၇

ဓာတ်ဘူးကိုတပ်ဆင်ပါ။

- ဓာတ်ဘူးကိုစက်အတွင်းသို့ချက်ကနဲအသံကြားသည့်အထိတွန်းထည့်ပါ။

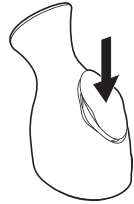

၈

စက်မှရေစက်များကိုသုတ်ပါ။

- စက်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြာ (အပတ်ပေါင်းများစွာ(သို့)အပတ်ပေါင်းများစွာထက်ပို၍) အသုံးမပြုသည့်အခါဓာတ်ဘူးနှင့်စက်အတွင်းရှိရေအားလုံးကိုသုတ်ပါ။စက်ကိုလုံလောက်စွာအခြောက်ခံပြီးမှသာစက်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။

စက်ကိုသန့်စင်ခြင်း

စက်ကိုရေတွင်ဆေးကြောခြင်း(သို့)နှစ်မြှုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

စက်အတွင်းပိုင်းဆေးကြောခြင်း


- စက်ကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။
- ရေအကြွင်းအကျန်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အနည်းဆုံး၁၀မိနစ်ခန့်အအေးခံ၍အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းသန့်ရှင်းပါ။

၁

ဓာတ်ဘူးထဲတွင်ရေကို“အပြည့်”အမှတ်ရောက်သည်အထိဖြည့်၍ဓာတ်ဘူးအဖုံးကိုပိတ်ပါ။


၂

ဓာတ်ဘူးကိုစက်တွင်တပ်ပါ။

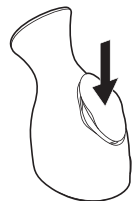

စက်ကိုသန့်စင်ခြင်း


- ၃ စက်ကိုအလျားလိုက် ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်ခန့်လှုပ်ပါ။
- စက်ကိုမစောင်းဘဲဖြည်းညှင်းစွာလှုပ်ပါ။

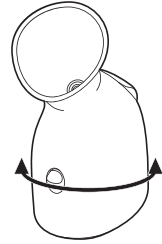

- ၄ ဓာတ်ဘူးကိုစက်မှဖြုတ်ပါ။

- ၅ စက်အတွင်းရှိရေများကိုသွန်းပါ။

- စက်၏အောက်ခြေရှိရေထွက်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါ “ရေမြောင်း” မြှား၏လားရာအတိုင်းရေထွက်ပေါက်မှရေများကိုသွန်းပါ။
- စက်ကိုညီညာသောအနေအထားတွင်ပြန်ထား၍အထက်ပါအဆင့်အတိုင်း ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်ခန့်တစ်ဖန်ပြန်လုပ်ပါ။

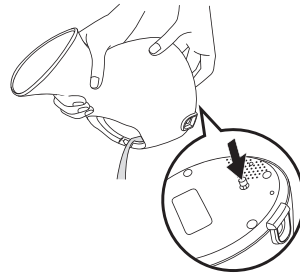

- ၆ အဆင့် ၂ မှ ၅ အထိအထက်ပါအတိုင်း ၂ ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ပါ။

- ၇ စက်နှင့်ဓာတ်ဘူးပေါ်ရှိရေများကိုသုတ်ပါ။

ရေများသွန်လိုက်သည့်အခါတွင်မှ အချို့ရေများသည့်စက်တွင်ကျန်ရှိနေနိုင်သည်။ စက်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါရေများဆူပွက်နိုင်သောကြောင့်ရေဆိုးနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများမဖြစ်စေနိုင်ပါ။


စက်ကိုသန့်ရှင်းခြင်း

စက်ကိုရေတွင်ဆေးကြောခြင်း၊ နှစ်မြှုပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- စက်ကိုဆပ်ပြာရည်စွတ်ထားသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- အရက်ပြန်၊ တင်နား၊ ဘန်ဇင်း၊ ကြေးရည်မျှော်ဆေးစသည့်တို့ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကစက်ချွတ်ယွင်းခြင်း (သို့) အစိတ်အပိုင်းများအကဲကြောင်းရှာထင်ခြင်း (သို့) အရောက်ကျွတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။


မီးကြိုးကိုသန့်ရှင်းခြင်း

- မီးကြိုးကိုတစ်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။
- ပါဝါပလပ်ခုံမှပလပ်ခေါင်းနှင့်စက်မှပလပ်ခေါင်းတို့ကိုဖြုတ်ပါ။ အဝတ်အခြောက်ကိုသုံး၍ ဖုန်စသည့်တို့ကိုသုတ်ပါ။

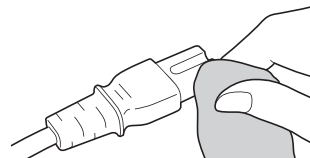


အကယ်၍ဓာတ်ဘူးအဖုံးရော်ဘာစွပ်ကိုဖြုတ်လျှင်


၁. လက်ညှိုးဖြင့်ဓာတ်ဘူး၏အလယ်တည့်တည့်ကိုအပေါ်သို့တွန်းတင်ပါ။

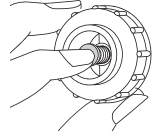

၂. ဓာတ်ဘူးအဖုံးရော်ဘာစွပ် (က) ၏အပြင်ဘက်နှုတ်ခမ်းတစ်လျှောက် ညင်သာစွာဖိထည့်၍ဓာတ်ဘူးရော်ဘာစွပ် (ခ) ပေါ်ရှိမြင့်တက်နေသော အစွန်းကိုရှာပါ။

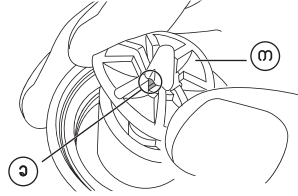

၃. ရော်ဘာစွပ်ကိုလက်ဖြင့်လှည့်၍ဓာတ်ဘူးအဖုံး ရော်ဘာစွပ်ကိုပေါ်လာစေပြီးဓာတ်ဘူးရော် ဘာစွပ် (ဃ) ပေါ်ရှိမြင့်တက်နေသော အစွန်းကိုဓာတ်ဘူးအဖုံး (ဂ) ပေါ်ရှိ မြောင်းနှင့်ကိုက်၍ထည့်ပါ။

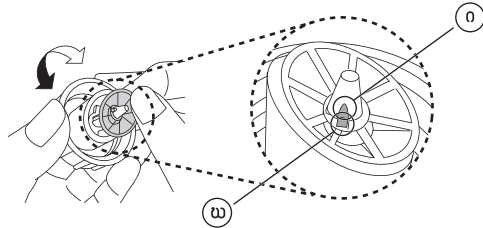

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ် : EH-SA31

ရှိရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀-၂၄၀ ဗို့ ~ ၂၅၀-၆၀ တာတ်စ်
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၂၉၀ ဝပ်
ရေငွေ့ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း	ပျမ်းမျှ ၆ မီလီလီတာ / ၁ မိနစ်
ရေငွေ့ငွေ့အပူချိန်	ပျမ်းမျှ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ပိုက်ခေါင်း၏အစွန်းမှပျမ်းမျှ၂၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေး)

ဤစက်သည်အိမ်တွင်းသုံးရန်သာဖြစ်သည်။

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co.,Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China