


Panasonic

Hướng dẫn sử dụng (Gia dụng) Máy tắm nước Mẫu máy EW-DJ26

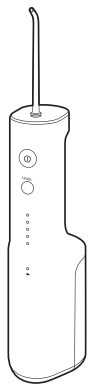

- **Trong trường hợp có bất thường hoặc hỏng hóc**
 - Lắp tức ngừng sử dụng và rút phích cắm điện khi sử dụng bộ sạc.
 - Không làm như vậy có thể gây hỏa hoạn, giết điện, hoặc chấn thương.
- Trong trường hợp có bất thường hay hư hỏng
 - Thân sản phẩm hoặc bộ sạc bị biến dạng hoặc nóng bất thường.
 - Thân sản phẩm hoặc bộ sạc có mùi khét.
 - Nghe thấy âm thanh bất thường trong quá trình sử dụng hoặc sạc thân sản phẩm hoặc bộ sạc.
- Ngay lập tức yêu cầu kiểm tra hoặc sửa chữa tại một trung tâm dịch vụ được ủy quyền.

- **Sản phẩm này**
 - Sản phẩm này có một pin sạc tích hợp. Không ném vào lửa, làm nóng hoặc sạc, sử dụng hoặc để sản phẩm này trong môi trường nhiệt độ cao.
 - Làm như vậy có thể gây hiện tượng quá nhiệt, bốc cháy hoặc nổ pin sạc tích hợp.
- Không điều chỉnh hoặc sửa chữa.
 - Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương.
 - Liên hệ với trung tâm bảo hành ủy quyền để sửa chữa sản phẩm (thay pin, v.v.).
- Không được tháo rời, trừ khi thải bỏ sản phẩm.
 - Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương.

- **Vệ sinh**
 - Luôn rút phích cắm khỏi ổ cắm điện của hộ gia đình khi vệ sinh bộ sạc.
 - Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương.
- Vệ sinh phích cắm thường xuyên để ngăn ngừa bụi bặm tích tụ (nửa năm một lần).
 - Làm như vậy có thể gây ra hỏa hoạn do độ ẩm làm hỏng lớp cách điện.
- Rút phích cắm và lau sạch bằng vải khô.

- **Xin ghi lại các lưu ý sau**
 - Thiết bị này không sử dụng cho người (bao gồm trẻ em) có khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm và hiểu biết sử dụng, trừ khi có người bảo hộ an toàn hướng dẫn hoặc giám sát họ cách sử dụng thiết bị. Trẻ em cần được giám sát để chắc chắn chúng không đùa nghịch với thiết bị.
 - Không làm vậy có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.
- Dây nguồn không thay thế được. Trường hợp dây nguồn bị hỏng, cần bỏ bộ sạc.
 - Làm như vậy có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

⚠ THẬN TRỌNG

- **Ngăn ngừa tổn thương răng và nướu**
 - Những người không biết vận hành không nên sử dụng thiết bị này.
 - Những người có sức khỏe răng miệng yếu không nên sử dụng thiết bị này.
 - Việc này có thể gây thương tích hoặc tổn thương răng và nướu.
- Những người có thể mắc bệnh nha chu, đang điều trị răng hoặc lo ngại về các triệu chứng liên quan đến khoang miệng nên tham khảo ý kiến nha sĩ trước khi sử dụng.
 - Việc không thực hiện theo hướng dẫn này có thể gây thương tích hoặc tổn thương răng và nướu.

- **Sản phẩm này**
 - Không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài vệ sinh răng miệng.
 - Làm như vậy có thể gây tai nạn hoặc thương tích khi dòng nước đi vào mắt, mũi, tai hoặc cổ họng.
 - Không đổ nước ấm trên 40°C vào ngăn đựng nước.
 - Làm như vậy có thể gây bỏng.
 - Không dùng chung đầu tắm với người thân trong gia đình hoặc những người khác.
 - Việc này có thể gây tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng.
 - Không đặt vật kim loại như đồng xu hoặc kẹp lên trên bộ sạc.
 - Việc này có thể gây bỏng do quá nhiệt.

- **Xin ghi lại các lưu ý sau**
 - Không để đồ kim loại hoặc rác dính vào phích cắm điện.
 - Làm như vậy có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn do chập điện.
 - Không được làm rơi hoặc va chạm máy.
 - Làm vậy có thể gây thương tích.
 - Không được quấn dây điện xung quanh bộ sạc khi cất sản phẩm.
 - Việc này có thể khiến lõi dây bên trong dây điện bị gãy do tải trọng và có thể gây hỏa hoạn do chập điện.
 - Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm điện trong hộ gia đình khi không sạc.
 - Làm như vậy có thể gây giật điện hoặc hỏa hoạn do rò điện do lớp cách điện bị hỏng.
 - Rút phích cắm bằng cách giữ tay vào phích cắm thay vì dây điện.
 - Việc không làm theo hướng dẫn này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn do chập điện.
 - Sau khi sử dụng, vệ sinh phần thân và đầu tắm rồi lau khô.
 - Việc không làm theo chỉ dẫn này có thể gây hại tới sức khỏe của bạn do sự lây lan của nấm mốc và vi khuẩn.

Xử lý pin đã tháo khi thải bỏ

⚠ NGUY HIỂM

- Pin sạc chỉ dành riêng cho thiết bị này. Không sử dụng pin với các sản phẩm khác.
- Không sạc pin sau khi đã tháo pin ra khỏi sản phẩm.
- Không ném vào lửa hoặc gia nhiệt.
- Không đập, tháo rời, điều chỉnh hoặc đâm thủng bằng đinh.
- Không để cực dương và cực âm của pin tiếp xúc với nhau qua các vật kim loại.
- Không mang hoặc cất pin cùng các món đồ trang sức bằng kim loại như dây chuyền và kẹp tóc.
- Không sử dụng hoặc để pin ở nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như dưới ánh nắng trực tiếp hoặc gần các nguồn nhiệt khác.
- Không bóc vỏ ống.
- Việc này có thể gây quá nhiệt, đánh lửa hoặc nổ.

⚠ CẢNH BÁO

- Sau khi tháo pin sạc, không để pin gần tầm tay trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
- Pin sẽ gây hại cho cơ thể nếu vô tình nuốt phải.
 - Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

- Trường hợp chất lỏng trong pin rò rỉ ra ngoài và dính vào mắt, không dụi mắt mà hãy rửa kỹ bằng nước sạch, chẳng hạn như nước máy.
- Việc không thực hiện theo chỉ dẫn này có thể gây tổn thương mắt.
- Tham khảo ngay ý kiến của bác sĩ.

⚠ THẬN TRỌNG

- Trường hợp chất lỏng trong pin rò rỉ ra ngoài và dính vào da hoặc quần áo, cần rửa ngay bằng nước sạch, chẳng hạn như nước máy.
- Việc không thực hiện theo chỉ dẫn này có thể gây viêm nhiễm.


Thông tin quan trọng

- Khi mới bắt đầu sử dụng máy tắm nước, bạn có thể bị chảy máu nhẹ ở phần nướu mặc dù nướu của bạn có thể khỏe mạnh. Điều này là do nướu của bạn bị kích thích khi sử dụng máy tắm nước lần đầu. Tình trạng chảy máu sẽ hết sau một đến hai tuần sử dụng. Tình trạng chảy máu kéo dài trên hai tuần có thể là dấu hiệu cho tình trạng Trong trường hợp này, vui lòng ngừng sử dụng máy tắm nước và tham khảo ý kiến nha sĩ.nướu bất thường, chẳng hạn như bệnh nha chu.
- Không cho muối, nước súc miệng hoặc các hóa chất khác vào ngăn đựng nước. Việc này có thể gây hỏng máy.
- Không sấy khô thiết bị bằng máy sấy hoặc quạt sưởi. Việc này có thể gây hỏng máy hoặc biến dạng các bộ phận.
- Cắt giữ sản phẩm ở nơi có độ ẩm thấp sau khi sử dụng. Việc để thiết bị trong nhà tắm có thể gây hỏng máy.
- Biểu tượng sau đây báo hiệu cần sử dụng bộ cấp nguồn có thể tháo rời cụ thể để kết nối thiết bị điện với nguồn điện lưới.Thông tin tham khảo về loại bộ cấp nguồn được đánh dấu gần biểu tượng.



- Sạc thiết bị đúng cách theo Hướng dẫn sử dụng. (Tham khảo phần "Sạc").
- Thiết bị này có chứa pin, chỉ người có đủ kỹ năng mới được thay pin. Vui lòng liên hệ với một trung tâm bảo hành được ủy quyền để nắm được thông tin sửa chữa.

Nhận dạng các bộ phận

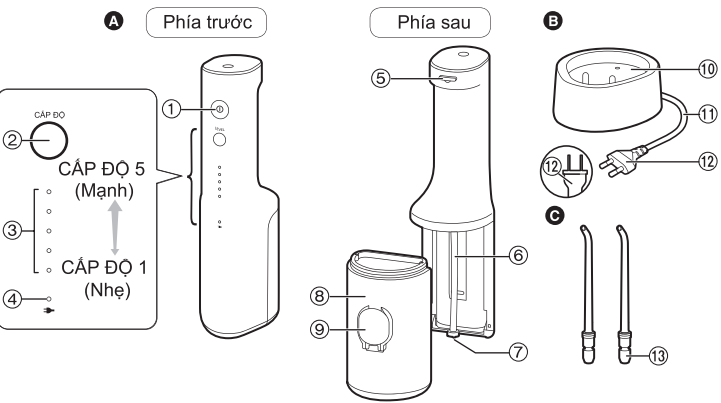


- A Thân máy**
 - ① Công tắc nguồn (①)
 - ② Nút điều chỉnh cấp độ
 - ③ Chỉ báo mức áp suất nước (màu xanh da trời)
 - ④ Đèn báo trạng thái sạc /pin yếu (màu đỏ)
 - ⑤ Nút nhả đầu tắm
 - ⑥ Ống hút
 - ⑦ Bộ lọc
 - ⑧ Ngăn đựng nước
 - ⑨ Nắp ngăn đựng nước
- B Bộ sạc (RE8-59) (Hình dạng phích cắm sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực.)**
 - ⑩ Phần sạc
 - ⑪ Dây điện
 - ⑫ Phích cắm
- C Đầu tắm dùng thường xuyên (x2)**
 - ⑬ Cổng lắp đầu tắm
 - Đầu tắm là vật tư tiêu hao.

Lưu ý
Bên trong thân máy có thể bị ẩm (ngăn đựng nước và ống hút) do phần sót lại của nước cất đọng để thử nghiệm sản phẩm.


Sạc

- Khi pin còn ít**
Đèn báo trạng thái sạc/pin yếu () nhấp nháy một lần một giây trong các trường hợp sau.
 - Khi bạn bật công tắc nguồn
 - Khi bạn ấn nút điều chỉnh cấp độ
 - Khi bạn tắt công tắc nguồn (hết nhấp nháy sau 5 giây)Khi đèn báo trạng thái sạc/pin yếu () nhấp nháy, hãy sạc pin.

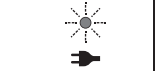

(Nhấp nháy)

- 1 Cắm phích cắm vào ổ điện dùng tại nhà.**
- 2 Lắp thẳng thân máy vào bộ phận sạc, mặt trước hướng về phía trước.**
 - Quá trình sạc hoàn tất sau khoảng 17 giờ. (Thời gian sạc tùy thuộc vào dung lượng pin còn lại).

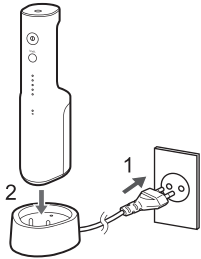

► Màn hình hiển thị trong khi sạc

Đang sạc	Đã sạc xong	Quá trình sạc xảy ra sự cố bất thường (Nhấp nháy hai lần trong một giây)
(Đèn sáng ● /Đèn tắt ○ /Nhấp nháy)		

- 3 Để đảm bảo an toàn và tiết kiệm năng lượng, lưu ý rút phích cắm điện.**
 - Việc sạc pin trong vòng trên 17 giờ không gây ra bất kỳ hư hỏng nào đối với thân máy.


Cách kiểm tra xem quá trình sạc đã hoàn tất chưa.
Sau khi sạc xong, nếu bạn kết nối thân máy với bộ sạc và ngắt kết nối thân máy khỏi bộ sạc, đèn báo trạng thái pin/sạc yếu () sẽ sáng lên và tắt sau 5 giây.

Thời gian hoạt động sau khi sạc đầy
Xấp xỉ 10 phút
(Khi áp suất nước được đặt ở mức 5)
• Thời gian này thay đổi theo nhiệt độ môi trường xung quanh và điều kiện sử dụng.



- **Lưu ý**
 - Thời gian sạc tùy thuộc vào việc thiết bị được sử dụng lần đầu tiên hoặc chưa được sử dụng trong vòng trên 6 tháng.
 - Ngoài ra, đèn báo trạng thái sạc/pin yếu () có thể không sáng trong vài phút đầu sạc nhưng sẽ sáng lên trong quá trình tiếp tục sạc.
 - Pin sẽ hỏng nếu không sử dụng trong vòng trên 6 tháng, vì vậy, lưu ý sạc đầy pin ít nhất 6 tháng một lần.
 - Nhiệt độ môi trường xung quanh khuyến nghị cho quá trình sạc là 5°C - 35°C. Pin có thể không được sạc đúng cách hoặc không sạc được ở nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.
 - Việc tiếp tục sạc pin không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của pin.

Cách sử dụng

- 1 Đổ đầy nước vào ngăn đựng nước.**
 - 1. Mở nắp ngăn đựng nước.

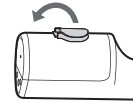

- 2. Đổ thêm nước, đồng thời giữ nguyên mức của phần thân chính.
 - Luôn sử dụng nước máy mới hoặc nước ấm.
 - Nếu bạn cảm thấy nước lạnh, hãy sử dụng nước ấm có nhiệt độ từ 40°C trở xuống.

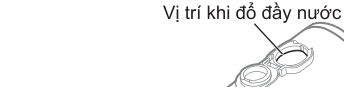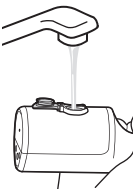

- 3. Đóng nắp ngăn đựng nước một cách an toàn.



- 2 Lắp đầu tắm.**
 - Ấn thật chặt cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch".

